

# Panasonic<sup>®</sup>

## 添付文書 取扱説明書

家庭用


マッサージソファ

品番

EP-MS50



EP-MS50

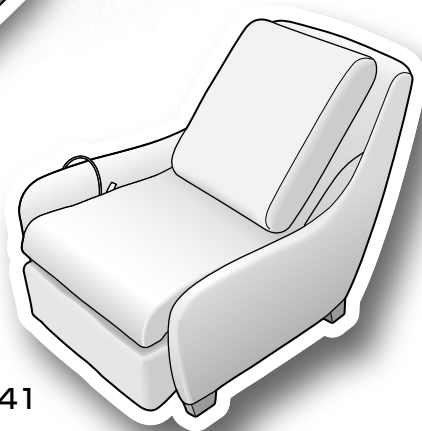

EP-MS41


- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



保管用

保証書別添付

マッサージ器としてはもちろん  
ふだんはゆったりくつろげるソファとしても  
ご利用いただけます。

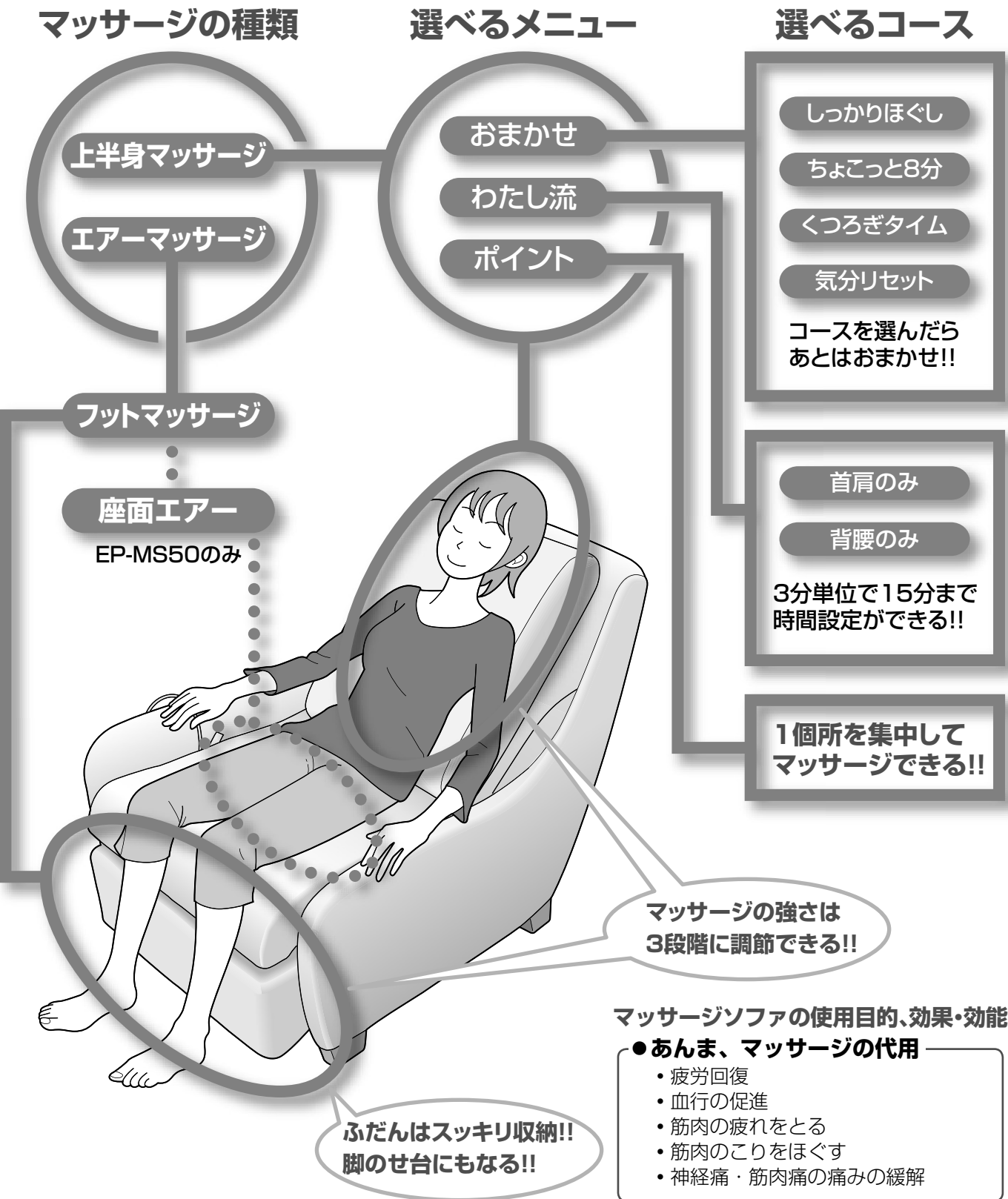

もくじ

ご使用前に

●安全上のご注意 .....	4
●はじめに(設置場所について) .....	7
●各部のなまえとはたらき .....	8
●設置する .....	10

使いかた

●脚のせ台の使いかた .....	12
●毎回マッサージをはじめる前に(本体を確認)..	12
●メニューを選んでマッサージをはじめる .....	15
●「おまかせ」でマッサージ .....	16
●「わたし流」でマッサージ .....	19
●「ポイント」でマッサージ .....	21
●「エアーマッサージ」を使う .....	22
●マッサージを終了する .....	23

お手入れ／Q&A

●お手入れのしかた .....	24
●カバー類の着脱のしかた .....	25
●マッサージコースのおおまかな内容 .....	27
●Q&A .....	28

お知らせ

●定格・仕様 .....	29
●故障かな?と思ったとき .....	30
●保証とアフターサービス .....	35



本書は、EP-MS41とEP-MS50の共用取扱説明書です。  
本体イラストや操作器、表示部のイラストは主にEP-MS41を使用しています。  
あらかじめご了承ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 <b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 <b>注意</b>	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)


 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	--

 **警告**


 **必ず守る**

- 医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。  
(1)ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人  
(2)悪性しゅよう(腫瘍)のある人  
(3)心臓に障害のある人  
(4)妊娠中や出産直後の人  
(5)糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人  
(6)骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性とう(疼)痛性疾患の人  
(7)施療部位に創傷のある人  
(8)体温38℃以上(有熱期)の人  
(例：急性炎症症状[けん怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)  
(9)安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき  
(10)背骨に異常のある人、曲がっている人  
(11)椎間板ヘルニア症の人  
(12)上記以外に身体に特に異常を感じているとき  
守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。  
守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 月に1回程度、背パッドもしくは本体カバーをめくり、もみ玉が可動する部分の布地に破れがないか確認する。  
● 本体カバーを取り付ける前には、必ずもみ玉が可動する部分の布地が破れていないか確認する。  
また、カバーの表裏にも布地の破れがないか確認する。(EP-MS41のみ)  
(どんなに小さな破れでも、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理に出してください。)  
布地が破れた状態で使用するとけがや感電のおそれがあります。
- はじめは弱い刺激でマッサージする。  
● マッサージは1回15分以内にする。  
● 同一個所への使用は5分以内にする。  
守らないと逆効果やけがのおそれがあります。
- ご使用の後は必ず電源スイッチを「切」、施錠スイッチを「閉」にし、施錠キーを抜き電源プラグを抜く。  
守らないとお子様のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。  
守らないと感電や発熱による火災の原因になります。
- 電源プラグのほこり等は定期的にとる。  
守らないと湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。  
(ほこりは乾いた布でふいてください。)


 **警告**

 **禁止**


- 次の人は使用しない。  
医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)  
症状を悪化させるおそれがあります。
- お子様に使わせない。また、本体の上で遊ばせたり、脚のせ台・座面・背もたれ・ひじ掛けの上にのらせない。  
● 脚のせ台の上に立ったり座ったりしない。  
● 背もたれやひじ掛けの上にのらない。  
● ご自分で意思表示ができない人、または、操作できない人は使わない。  
● 首周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意して、首の前方や過度に強いマッサージはしない。  
事故やけがのおそれがあります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外での使用はしない。  
(海外での使用や変圧器を用いた使用はできません。)  
感電・故障や発熱による火災の原因になります。
- 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。  
(傷つけたり、加工したり、熱機器に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしない。)  
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。電源コードや電源プラグの修理は、販売店または「修理ご相談窓口」にご相談ください。


 **ぬれ手禁止**

- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。  
感電の原因になります。

 **分解禁止**

- 絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。  
発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

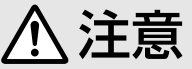 **注意**

 **必ず守る**

- 現在健康でも下記のような人は必ず医師と相談のうえ使用する。  
(1)加齢により筋肉の衰えた人や痩身の人 (2)骨や内臓に起因する腰痛の人  
(3)打ち身やねんざのしやすい人 (4)乗物酔いの激しい人 (5)過去に心臓や内臓の手術をされた人  
守らないと健康をそこなうおそれがあります。
- もみ玉が収納位置にあることを確認してから座る。  
● 本体に異物がはさまっていないか確認してから座る。  
(背もたれ、座面、フットマッサージ部に異物がはさまっていないか確認する。)  
守らないと事故やけがのおそれがあります。
- 頭部につけた髪ざりなどの硬いものははずしてから座る。  
守らないとけがのおそれがあります。
- マッサージ中に本体から降りるときは、必ず動作を止めてから降りる。  
守らないと事故やけがのおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く。  
守らないと感電やショートのおそれがあります。
- 安全のためにアースを確実に取り付ける。(P.11参照)  
守らないと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。
- 本体を移動するときは、必ずフットマッサージ部のスライドを完全に戻す。  
守らないと移動中にスライドが戻り、けがをするおそれがあります。
- キャスターで移動するときは、周囲の障害物を取り除き、座面を腰より低く持ち上げ(床から約80cm以下)、ゆっくり移動する。(P.11参照)  
守らないと転倒による事故やけがのおそれがあります。

安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意	
❗ 必ず守る	● 水平な場所で使用する。 守らないと本体が倒れて事故のおそれがあります。
	● 動かない場合や、異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。 守らないと感電や発火のおそれがあります。
	● 本品の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し医師に相談する。 守らないと事故や体調不良のおそれがあります。
	● 施錠キーは、子供の手の届かない場所に保管する。 守らないと誤飲やいたずらによる事故やけがのおそれがあります。
🚫 禁止	● 他の治療器と同時に使用しない。 事故や体調をくずすおそれがあります。
	● もみ玉に頭、おなか、素肌をあてない。また、もみ玉に手や脚をはさまない。
	● ふくらはぎ・足裏マッサージ部にひざをはさまない。
	● 使用中に眠らない。また、飲酒後の使用はしない。 事故やけがのおそれがあります。
	● 本体とフットマッサージ部の間に手や脚を入れない。
	● マッサージ使用中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「切」にしない。 けがのおそれがあります。
	● フットマッサージ部の上に立たない。 フットマッサージ部の先端部分が回転したり、本体が傾いて事故やけがのおそれがあります。 また、前面カバーの端につまずいて転倒するおそれがあります。(EP-MS41のみ) フットマッサージ部底面が床に当たると、床を傷つけるおそれがあります。
	● フットマッサージ部の足裏部とふくらはぎ部のすき間に脚を入れて立ち上がらない。 転倒による事故やけがのおそれがあります。
	● フットマッサージ部のすき間に手・腕や頭などを入れない。 安全のために、マッサージ終了後は、必ず収納してください。 けがのおそれがあります。
	● 設置された状態のまま、本体を引きずったり押したりしない。
🚫 水場使用禁止	● 浴室など湿気の多い場所で使わない。 感電や故障の原因になります。
	● 本体や操作器には水などをこぼさない。 感電やショート、故障の原因になります。
🔌 電源プラグを抜く	● お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。 感電ややけどのおそれがあります。
	● 停電のときは直ちに電源プラグを抜く。 停電復帰時、事故やけがのおそれがあります。
	● 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。

はじめに(設置場所について)

箱から出す前に、設置する場所を決めておいてください。

⚠ 注意


- 浴室など湿気の多い場所で使わない。  
感電や故障の原因になります。
- 水平な場所で使用する。  
守らないと本体が倒れて事故のおそれがあります。
- ホットカーペットなどの暖房器具の上で使わない。  
火災のおそれがあります。




ソファとして  
ゆったりくつろげる  
場所を選んで  
ください。

● 直射日光が毎日長時間当たるところや、暖房器具の近くなど高温になるところへの設置は避けてください。  
表面素材が変色したり、変質するおそれがあります。

● 本体の背面が物と接触しないように設置してください。  
(背面が変形するなど、故障の原因になります)

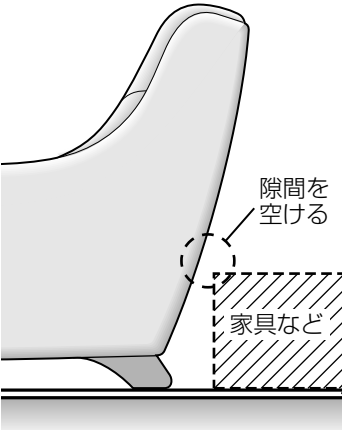

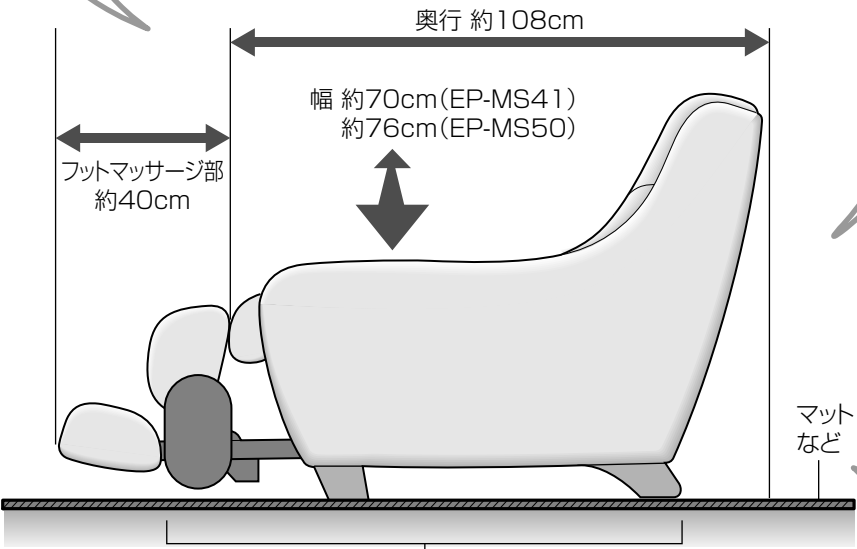

奥行 約108cm


幅 約70cm(EP-MS41)  
約76cm(EP-MS50)

フットマッサージ部 約40cm

本体とフットマッサージ部が接地する部分 約115cm

マットなど

● たたみや床を傷つけることがありますので、本体の下にマットなどを敷くことをお勧めします。  
本体とフットマッサージ部が接地する部分を覆える大きさ  
最低 幅65cm×奥行き115cm

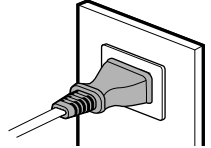


● コンセントの近くに設置してください。

# 各部のなまえとはたらき

## 本体


(イラストはEP-MS41です)

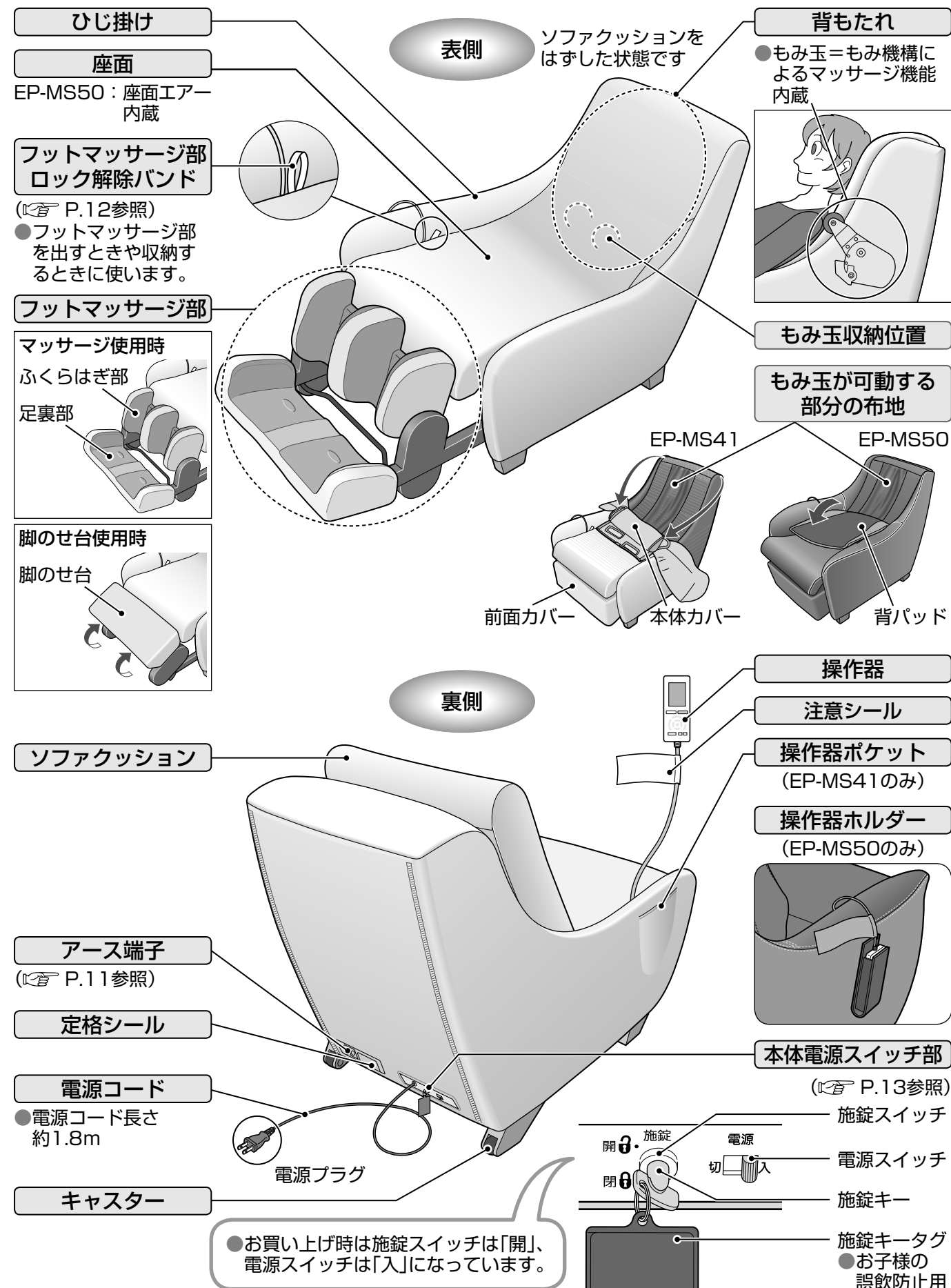

## 操作器

(イラストはEP-MS41です)

### 表示部

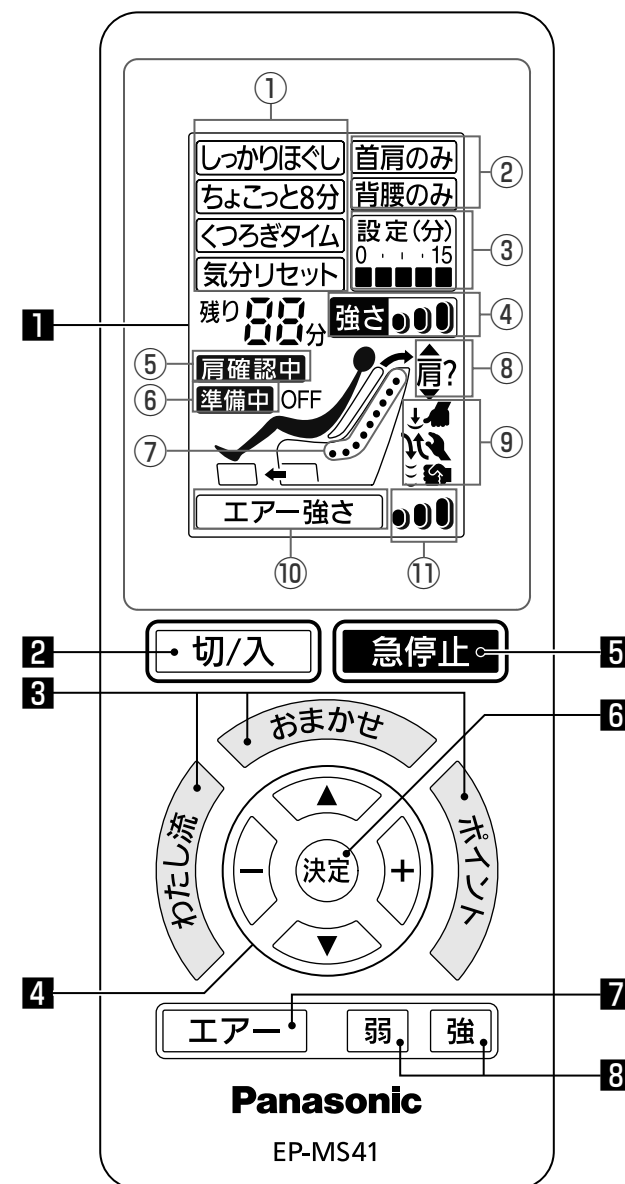

- 1 表示部
  - すべて点灯した状態のイラストです。
- 2 切/入ボタン
  - 電源の切/入に使用します。
- 3 メニュー選択ボタン
- 4 上下(▲▼)選択/ - + 調節ボタン
- 5 急停止ボタン
  - マッサージを急いで停止したいときに押します。
- 6 決定ボタン
- 7 エアーマッサージ切/入ボタン
- 8 エアーマッサージ強さ調節ボタン


- ①「おまかせ」のコース表示
  - コースを選ぶとき…  
現在選択されているコース名が点滅します。
  - マッサージ中…  
現在行っているコース名を表示します。
- ②「わたし流」のコース表示
  - コースを選ぶとき…  
現在選択されているコース名が点滅します。
  - マッサージ中…  
現在行っているコース名を表示します。
- ③「わたし流」の設定時間表示
  - 「わたし流」のコースを選択すると表示されます。
- ④ コース強さ表示
  - 現在のコース強さを3段階で表示します。
- ⑤ 肩確認動作中表示
  - 肩のおおよその場所を確認する動作中(約15秒間)に点滅します。
- ⑥ 準備中表示
  - マッサージや肩確認動作がはじまるまでの準備動作中に点滅します。
- ⑦ もみ玉位置表示
  - もみ玉のおおよその現在位置を表示します。
- ⑧ 肩位置調節モード表示
  - 肩位置調節モード(約15秒間)のときに点滅します。
- ⑨ マッサージ動作表示
  - 現在行っているマッサージ動作を表示します。
  - ↓ ソフト指圧
  - ↘ もみ下げ
  - ↗ もみ上げ
  - ≡ たたき
- ⑩ エアーマッサージ切/入表示
  - エアーマッサージが「入」になっているとき点灯します。
- ⑪ エアーマッサージ強さ表示
  - 現在のエアーマッサージの強さを3段階で表示します。

# 設置する

## 1) 梱包箱を開けて商品を取り出す


### 本体と付属品を確認する

#### 本体

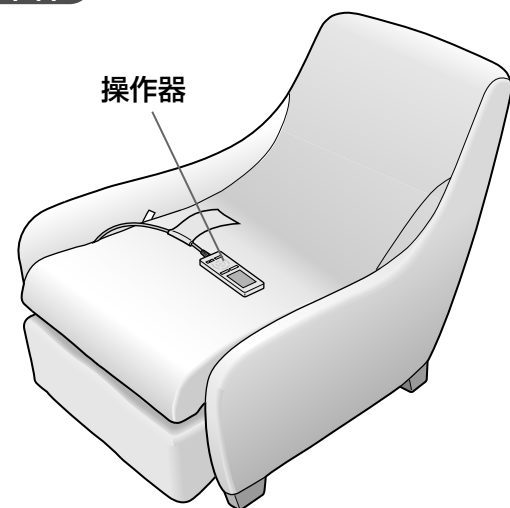


#### 付属品

操作器ホルダー  
(EP-MS50のみ)

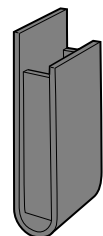

ソファクッション

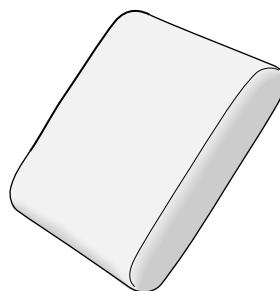

施錠キー (1本)



お買い上げ時は本体電源スイッチ部の施錠スイッチに差し込んであります。

## 2) 商品を搬入・設置する

### ⚠ 注意

- 設置された状態のまま、本体を引きずったり押し回したりしない。
- 床やたたみの上で、キャスターを使って移動させない。  
床やたたみに傷がつくおそれがあります。

- 人をのせたまま移動しない。  
転倒による事故のおそれがあります。

重量物ですので搬入移動時には腰などを痛めないようにご注意ください。

(必ず2人で運んでください。)

本体：約47kg (EP-MS41)


：約48kg (EP-MS50)

本体を下ろすときは、十分足元に注意してゆっくり下ろしてください。


### 持ち上げて搬入・設置するには

※正しい持ちかたをしないと、本体を落として床を傷つけるおそれがあります。

※フットマッサージ部が収納され、ロックがかかっていることを確認してください。

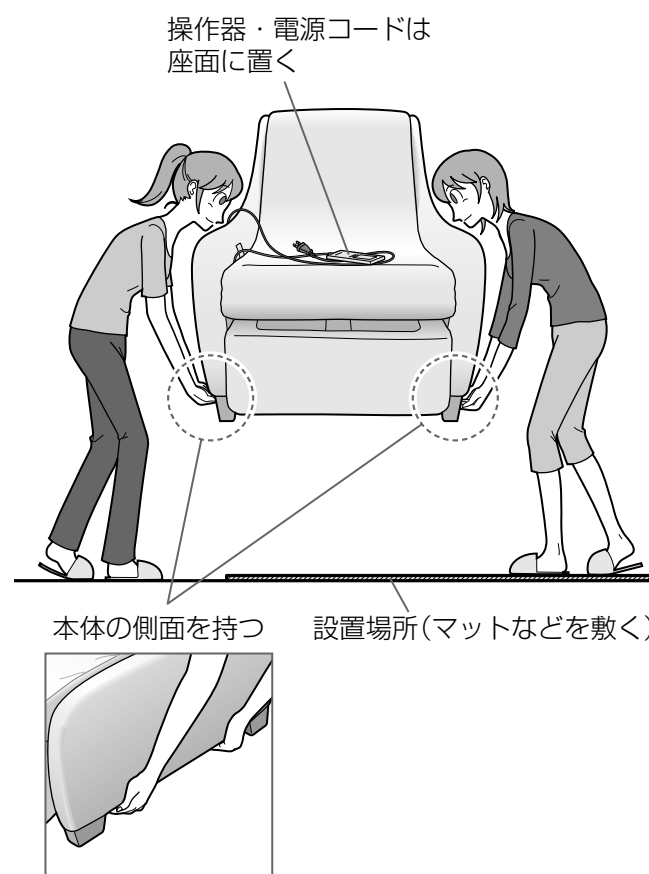


狭い通路などを通るときは、前後を持ってください

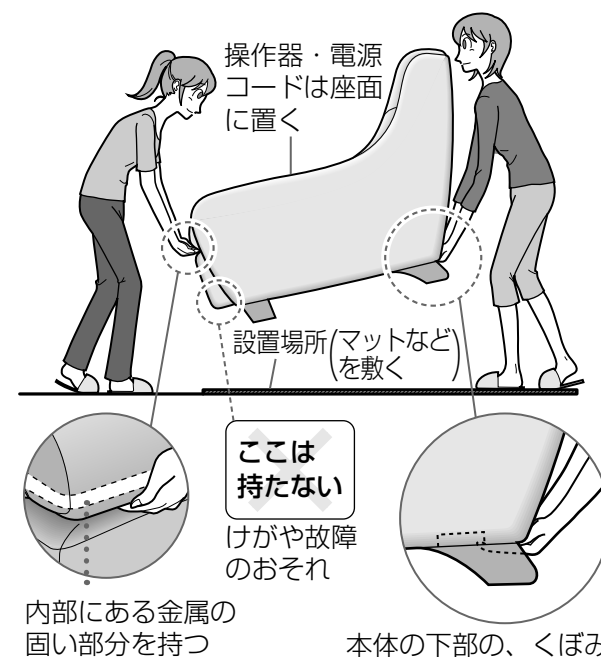


本体の下部の、くぼみ部分に指を掛けて持つ

間口を通らない場合は(☞ P.28参照)

### キャスターを使って搬入・設置するには

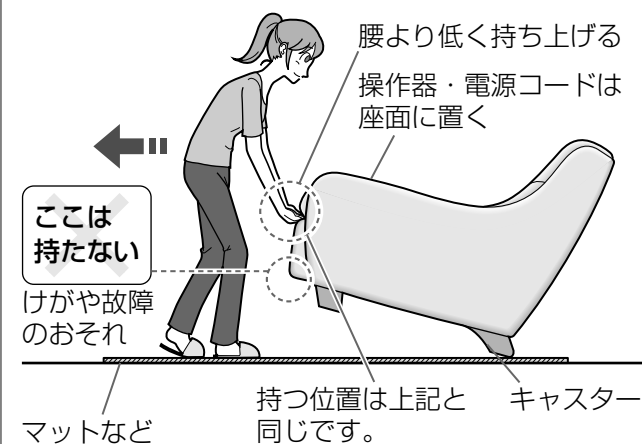


## 3) 操作器ホルダーを取り付ける(EP-MS50のみ)

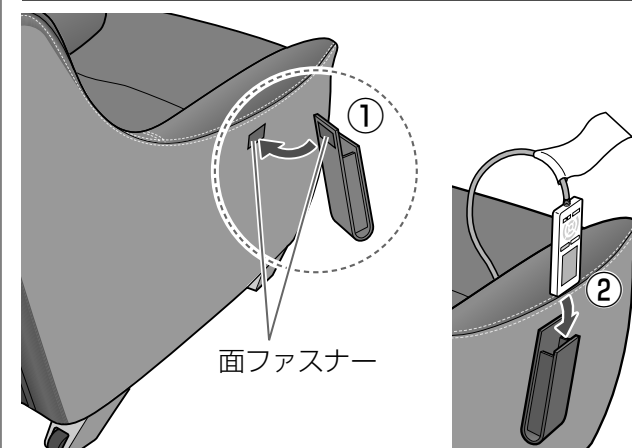

- EP-MS41 の場合は、操作器ポケットに操作器を入れてください。

## 4) ソファクッションを置く

ソファとして使うときはソファクッションを置いてください

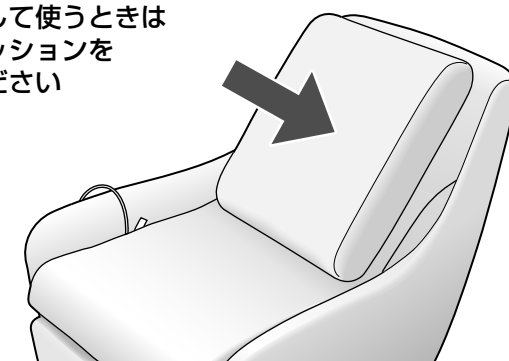



## 5) アースを取り付ける

### ⚠ 注意

- 安全のためにアースを確実に取り付ける。  
守らないと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。

### 電源コンセントにアース端子がある場合

- アース線を、本体のアース端子(ネジ)と電源コンセントのアース端子に取り付けてください。  
(アース線は付属していません)

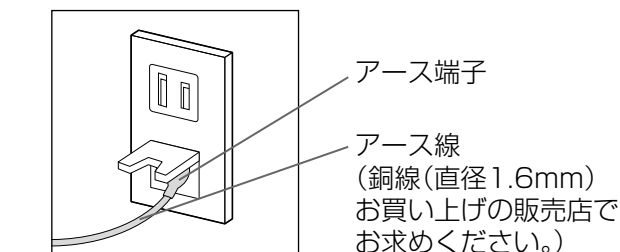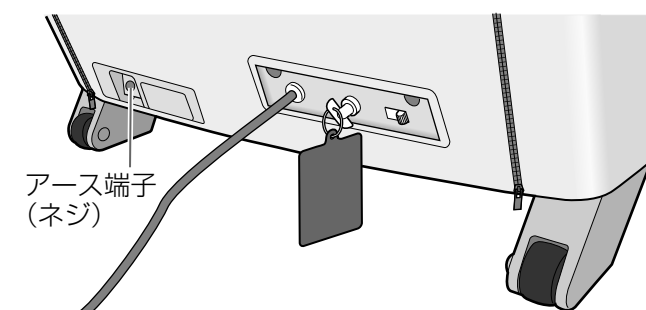

### 電源コンセントにアース端子がない場合

- お買い上げの販売店、電気工事に相談し、アース工事(D種<第三種>接地工事)をしてください。  
(アース工事費は本製品の価格には含まれておりません)

### 取り付けてはいけないところ

- ガス管：爆発や引火のおそれがあります。
- 電話線や避雷針：落雷のとき、感電や引火のおそれがあります。
- 水道管：途中がプラスチックの場合はアースになりません。



# 脚のせ台の使いかた


## ⚠ 警告

- 脚のせ台の上に立ったり座ったりしない。事故やけがのおそれがあります。

- ① フットマッサージ ロック解除バンドを真上に引き上げる  
フットマッサージ部が少し前方に出ます



- ② 足裏部に足を置く

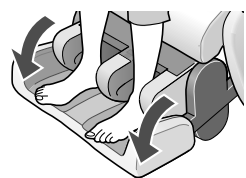


- ③ 「カチッ」とロックがかかるまで前方に踏み込む  
収納状態に戻らないようにロックがかかります。  
(足裏部やふくらはぎ部の角度は固定されません)



- ④ 足裏部から足を離す  
足裏部が持ち上がってきます



収納するには

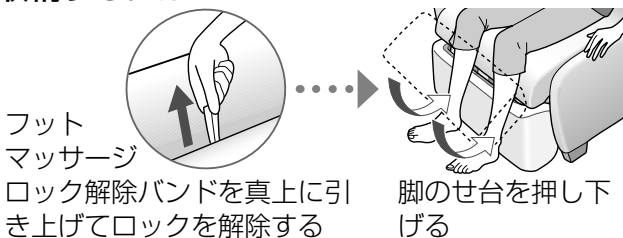

- 「カチッ」とロックがかかるまでしっかり押し込んでください。


# 毎回マッサージをはじめる前に(本体を確認)

- ① ソファクッションを取る

- ② もみ玉が収納位置にあることを手で触って確認する

## ⚠ 注意

- もみ玉が収納位置にあることを確認してから座る。守らないと事故やけがのおそれがあります。

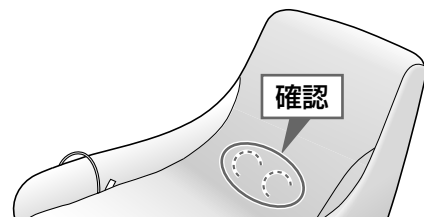

もみ玉が収納位置にない場合

- 手順⑤の後、操作者の「切/入」を2回押すと収納位置に戻ります。

- ③ 本体に異物をはさまっていないか確認する

## ⚠ 注意


- 本体に異物をはさまっていないか確認してから座る。(背もたれ、座面、フットマッサージ部に異物をはさまっていないか確認する。) 守らないと事故やけがのおそれがあります。

フットマッサージ部を確認するには

- ① フットマッサージ ロック解除バンドを真上に引き上げる


- 足裏部が閉じたままの状態でも前に押し出され、途中で止まります。

- ② 足裏部を倒し、異物をはさまっていないか確認する

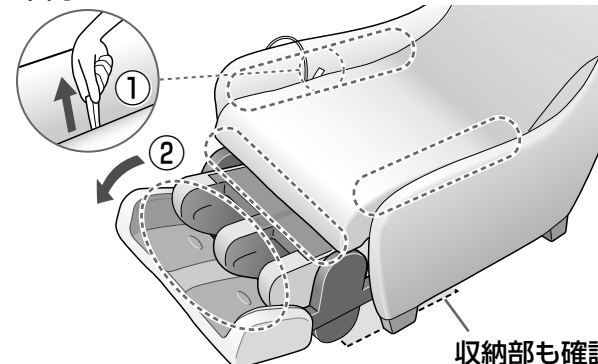


収納部も確認

- ③ 両手で座面の下に押し込んで収納する  
● 「カチッ」とロックがかかるまでしっかり押し込んでください。

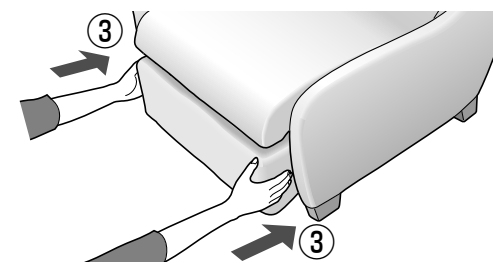

- ④ 電源コードや電源プラグを確認する

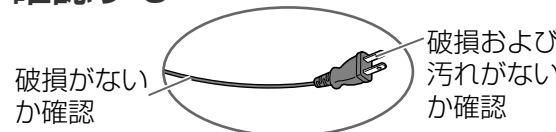

## ⚠ 警告


- 電源プラグのほこり等は定期的にとる。守らないと湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。(ほこりは乾いた布でふいてください。)
- 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。(傷つけたり、加工したり、熱機器に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしない。) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。電源コードや電源プラグの修理は、販売店または「修理ご相談窓口」にご相談ください。

- ⑤ 本体の電源を入れる

## ⚠ 警告

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。守らないと感電や発熱による火災の原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外での使用はしない。(海外での使用や変圧器を用いた使用はできません。) 感電・故障や発熱による火災の原因になります。
- めれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。感電の原因になります。


- ① 電源プラグを差し込む

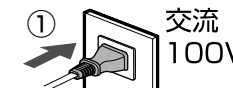

- ② 施錠キーを使って施錠スイッチを「開」にする



- ③ 電源スイッチを「入」にする

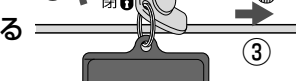

# 月に一回確認してください


## ⚠ 警告

- 月に1回程度、背パッドもしくは本体カバーをめくり、もみ玉が可動する部分の布地に破れがないか確認する。
- 本体カバーを取り付ける前には、必ずもみ玉が可動する部分の布地が破れていないか確認する。また、カバーの表裏にも布地の破れがないか確認する。(EP-MS41のみ) (どんなに小さな破れでも、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理に出してください。) 布地が破れた状態で使用するとけがや感電のおそれがあります。

もみ玉が可動する部分の布地に破れがないか確認する

EP-MS41

- 本体カバーをはずしてください。本体カバーのはずしかた(EP P.25参照)

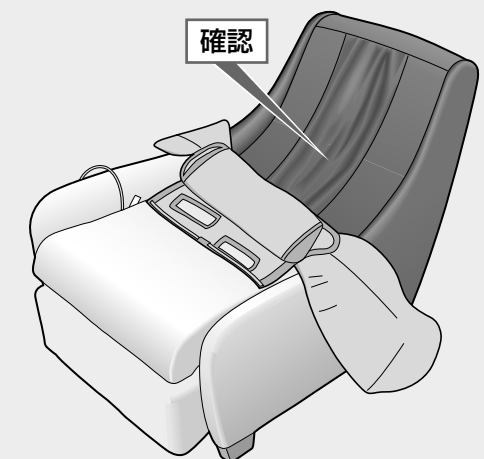

EP-MS50

- 背もたれ上部のファスナーをはずして、背パッドをめくってください。



▶ 次のページにつづく

毎回マッサージをはじめる前に (つづき)

## ⑥ 後頭部を背もたれ上部に合わせて座る




〈EP-MS50のみ〉

- 合成皮革部に色が移ることがありますので、ジーンズや色柄ものなど、色落ちしやすい衣類での使用はご注意ください。

フットマッサージ部使用時のみ


## ⑦ フットマッサージ部を前方に出し、脚を置く

- ①フットマッサージ ロック解除バンドを真上に引き上げる

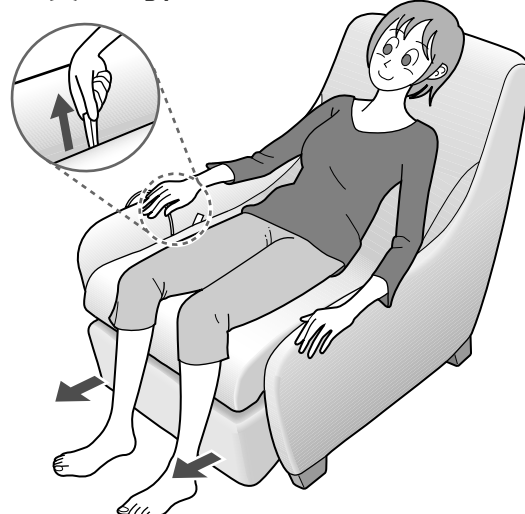

フットマッサージ部が少し前方に出ます。

- ②足裏部に足裏を置く
- ③「カチッ」とロックがかかるまで前方に踏み込む (足裏部やふくらはぎ部の角度は固定されません)

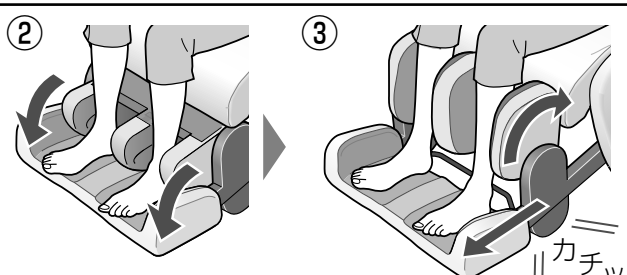

- 足裏部から足裏を離すと脚のせ台の状態になります。

身長が大柄な方でひざが浮いて窮屈に感じる場合

以下の①または②でお使いください。

- ①脚のせ台を利用して上半身のみをマッサージする (下記参照)  
(フットマッサージは別途お使いください)
- ②ひざが浮きにくいように、体を上にずらす (首肩は別途「わたし流」などでお使いください)


身長が小柄な方でフットマッサージ部を前方に出しにくい場合

体を前にずらしてください。



上半身のみをマッサージする場合

脚のせ台の状態にして、脚を伸ばして使うことができます。

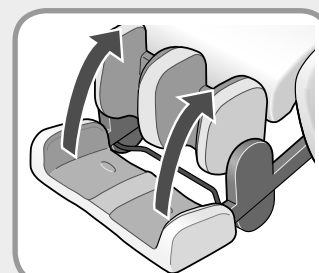

脚のせ台の使いかた (P.12参照)



- マッサージ中に体が前にずれる場合があります。その場合は、姿勢を戻してお使いください。

# メニューを選んでマッサージをはじめる


## ⚠ 警告

- はじめは弱い刺激でマッサージする。
- マッサージは1回15分以内にする。
- 同一個所への使用は5分以内にする。  
守らないと逆効果やけがのおそれがあります。

- 15分使用した後は10分程休みましょう。
- 1日2回まで30分を目安にご使用ください。

## ① 切/入 を押して、電源を入れる

メニュー選択ボタンが点滅

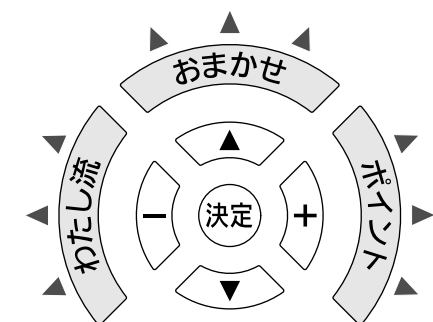

(電源を入れてから3分以内にメニューを選ぶかエアーマッサージを開始しないと自動で電源が切れます)

## ② 上半身のマッサージ

「おまかせ」「わたし流」「ポイント」からメニューを1つ選んで押す

おまかせ おまかせ P.16へ

首～腰までを自動でほぐす4つのコースが選べます。

わたし流 わたし流 P.19へ

「首肩のみ」「背腰のみ」のコースが選べます。  
マッサージする時間も設定できます。(15分以内)

ポイント ポイント P.21へ

ポイントを集中的にほぐすことができます。

## エアーマッサージ

エア- を押す P.22へ

エアーマッサージのみ、または上半身のマッサージと同時でも使えます。



(イラストはEP-MS41です)

※上図の画面表示はすでにソファクッションを取っていたり、フットマッサージ部を出していても表示されません。



# 「おまかせ」でマッサージ

[コース選択モード]



(イラストはEP-MS41です)


おまかせ

を押すと、「おまかせ」のコース  
選択モードになります

(コース選択モード中、3分以上操作しない状態が続くと自動で電源が切れます)

## 1 ▲▼でコースを選ぶ

「しっかりほぐし」「ちょこっと8分」「くつろぎタイム」「気分リセット」の中から1つ選べます。

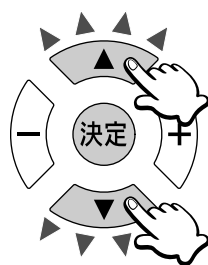

しっかりほぐし  
ちょこっと8分  
くつろぎタイム  
気分リセット

現在選択されている  
コースの枠が点滅

## コースの内容

### しっかりほぐし

- コリがひどく、とにかくしっかりほぐしたいときに…  
もみ、ソフト指圧、たたきで首～腰の筋肉を丹念にほぐすコースです。

### ちょこっと8分

- 空いた時間でちょこっと体をほぐしたいときに…  
しっかりほぐしコースをベースとして、疲れやすい部分に絞って、8分間に凝縮したコースです。

### くつろぎタイム

- くつろぎながら体をほぐしたいときに…  
くつろぎながら使えるように体をゆすったり、強く刺激する動きを控えたおだやかなコースです。

### 気分リセット

- 気分をスッキリと切り替えたいときに…  
徐々に刺激を弱くしていき、ふたたび刺激を強くすることで気分をスッキリとさせることを狙ったコースです。

## 2 コースを選んだら、 決定を押す

頭を背もたれにつけてください



ピッ、ピッ、ピッ…と音が鳴りながら、  
もみ玉が上部にゆっくり上がります。  
(準備中が点滅)

もみ玉が最上部まで上がると  
肩のおおよその場所を確認する  
動作が始まる【肩確認動作】




たたき動作をしながらもみ玉が下がってきます。  
(肩確認中が点滅)

- 座りかたによっては、もみ玉が一旦腰付近まで下がる場合があります。

ピピッと音が鳴って、肩?が  
点滅したら、肩位置に合うように  
もみ玉の位置を微調節する

【肩位置調節モード】

〈調節のしかた〉

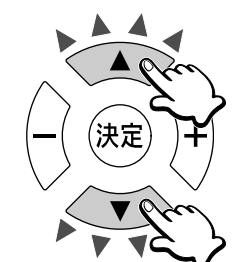


▲▼で位置を調節する  
(1回押すと約1.5cm)  
動きます

肩位置が合ったら決定を押すと、  
コースがはじまります

([決定]を押さなくても約15秒経過するとコースを開始します)

●参考●


〈肩位置の目安〉

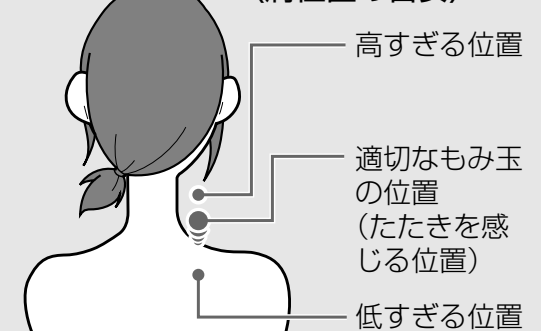

## 「おまかせ」でマッサージ (つづき)

### より自分好みに合わせるために

コース強さを調節したいとき

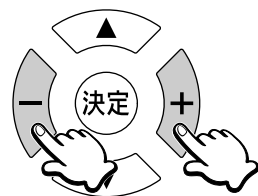

－＋調節ボタンで調節できます。

表示の内容	強さ●●)	強さ●●)	強さ●●)
強さ	1	2	3
調節	－ ← → ＋		

エアーマッサージも同時に使いたい場合

エアーを押してください

P.22へ

### マッサージの内容を変更したいとき

「おまかせ」の別のコースに選びなおしたいとき

おまかせを押し、再度コースを選択してください  
(上半身のマッサージは一旦停止します)

P.16へ

「わたし流」マッサージに変えたいとき

わたし流を押し、コースを選択してください  
(上半身のマッサージは一旦停止します)


P.19へ

「ポイント」マッサージに変えたいとき

ポイントを押してください  
(その場で動作がはじまります)

P.21へ

### コース中の画面例

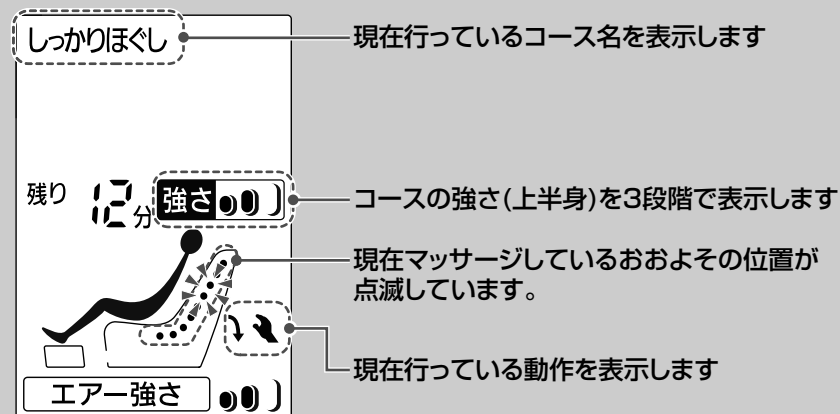

## 「わたし流」でマッサージ

[コース選択モード]





(イラストはEP-MS41です)

わたし流を押すと、「わたし流」のコース選択モードになります

(コース選択モード中、3分以上操作しない状態が続くと自動で電源が切れます)

### 1 ▲▼でコースを選ぶ

「首肩のみ」「背腰のみ」の中から1つ選べます。

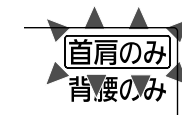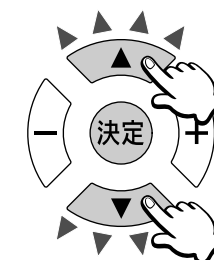


現在選択されているコースの枠が点滅

### 2 コースを選んだら、決定を押す

### 3 マッサージする時間を設定する

－＋調節ボタンで調節できます。

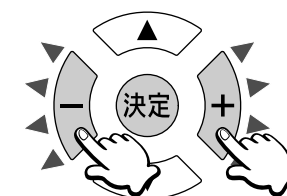

表示と時間の関係	設定(分)
約15分	0 . . . 15
約12分	0 . . . 15
約9分	0 . . . 15
約6分	0 . . . 15
約3分	0 . . . 15

●マッサージの途中で「わたし流」に変更した場合は、残り時間の範囲内で設定できます。

例)

残り 12分 ... 0 . . . 15 4目盛りが最大

残り 3分 ... 0 . . . 15 1目盛りが最大

▶ 次のページにつづく


## 「わたし流」でマッサージ (つづき)

### 4 設定が終わったら、**決定**を押す

#### 「首肩のみ」を選んだ場合

肩のおおよその場所を確認する動作が  
はじまる (P.17参照)

ピピッと音が鳴って、**肩?**が点滅したら、  
肩位置に合うようにもみ玉の位置を微調節する  
【肩位置調節モード】

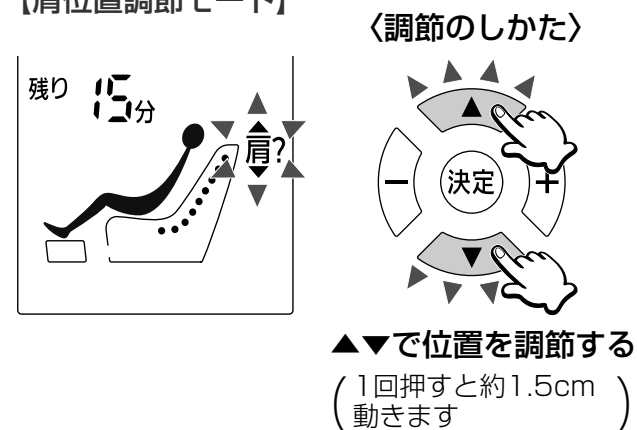

肩位置が合ったら**決定**を押すと、コースが  
はじまります

(**決定**)を押さなくても約15秒経過するとコースを  
開始します)

#### 「背腰のみ」を選んだ場合

もみ玉が背腰に移動してコースがはじまります

## より自分好みに合わせるために

### コース強さを調節したいとき



表示 内容	強さ●●	強さ●●●	強さ●●●●
強さ	1	2	3
調節	←	→	→

### エアーマッサージも同時に使いたい場合

**エアー**を押してください

P.22へ

## マッサージの内容を変更したいとき

- 「わたし流」ではじめに設定したマッサージ時間より  
も長くマッサージすることはできません  
誤って短い時間設定をしてしまった場合は、一旦  
マッサージを終了してから再度**切入**を押して設  
定しなおしてください。

### 「わたし流」の別のコースに選びなおしたいとき

**わたし流**を押し、再度コースを選択  
してください

(上半身のマッサージは一旦  
停止します)

P.19へ

### 「おまかせ」マッサージに変えたいとき

**おまかせ**を押し、コースを選択して  
ください

(上半身のマッサージは一旦  
停止します)

P.16へ

### 「ポイント」マッサージに変えたいとき

**ポイント**を押してください

(その場で動作がはじまります) P.21へ

## 「ポイント」でマッサージ

### 警告


- 同一個所への使用は5分以内にします。  
守らないと逆効果やけがのおそれがあります。

### ポイントを押す

「ソフト指圧」「もみ」「たたき」を組み合わせ  
た6種類の動作を順番に行います。

〈マッサージ動作の順番〉


- ① もみ上げ
- ② ソフト指圧
- ③ もみ下げ
- ④ たたき
- ⑤ もみ上げたたたき
- ⑥ もみ下げたたき

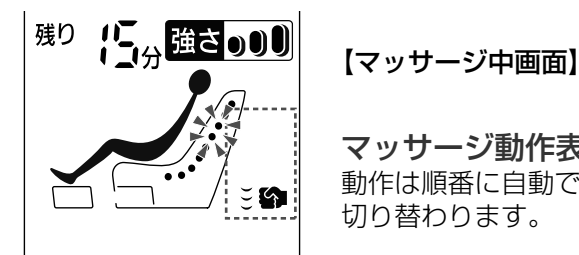

- 同一個所のマッサージが5分続いた場合は、自動で  
3cmほど上方に移動します。

## より自分好みに合わせるために

### 位置を調節したいとき

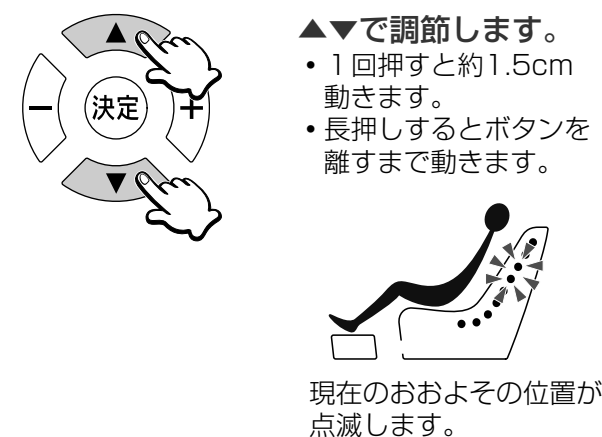

### コース強さを調節したいとき



表示 内容	強さ●●	強さ●●●	強さ●●●●
強さ	1	2	3
調節	←	→	→

## 「ソフト指圧」だけ、「もみ」 だけなど、1つの動作だけを 続けたい場合

その動作中に**決定**を押すと、その動作  
のみを行います。

- 動作を変更したい場合は、再び**ポイント**ボタン  
を押してください。動作が順番に自動で切り替わ  
ります。

### エアーマッサージも同時に使いたい場合

**エアー**を押してください

P.22へ

## マッサージの内容を変更したいとき

### 「わたし流」マッサージに変えたいとき

**わたし流**を押し、コースを選択して  
ください

(上半身のマッサージは一旦  
停止します)

P.19へ

### 「おまかせ」マッサージに変えたいとき

**おまかせ**を押し、コースを選択して  
ください

(上半身のマッサージは一旦  
停止します)

P.16へ


# 「エアーマッサージ」を使う

**「エア-」を押す**  
「エアーマッサージ」が始まります。



- 再度「エア-」を押すと切になります。  
(エアーマッサージのみを行っている場合は「切/入」で終了してください)

エアーマッサージの強さを調節したい

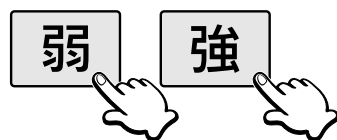

エアーマッサージ強さ調節ボタンの「弱」「強」で調節できます。

	エア-強さ ●●●		
表示	●●●	●●●	●●●
強さ	1	2	3
	弱	←…………→	強


## エアーマッサージの動作時間

- エアーマッサージだけを使う場合…  
約15分間マッサージを行います。
- 上半身と組み合わせて使う場合…  
上半身のマッサージが終了すると、同時にエア-  
マッサージも終了します。

## エアーマッサージの動作内容


### ふくらはぎ

ふくらはぎを両側から  
はさんで絞り上げるように  
圧迫します。

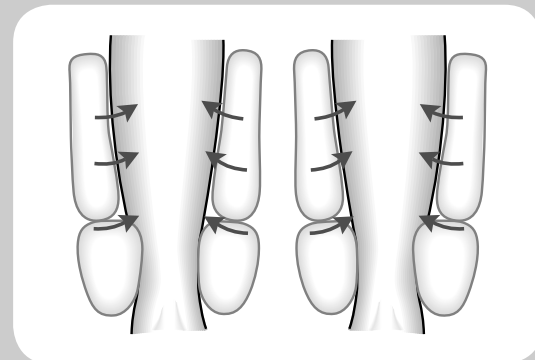


### 足裏

足裏を下からエア-で圧迫  
します。

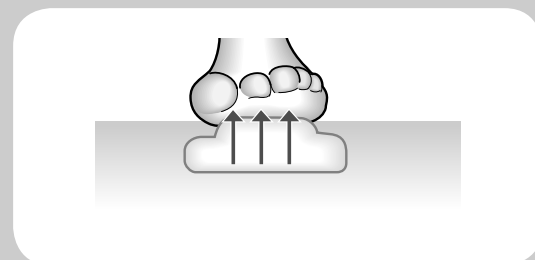

### 座面 (EP-MS50のみ)

お尻、太もも付近を下から  
エア-で押し上げます。

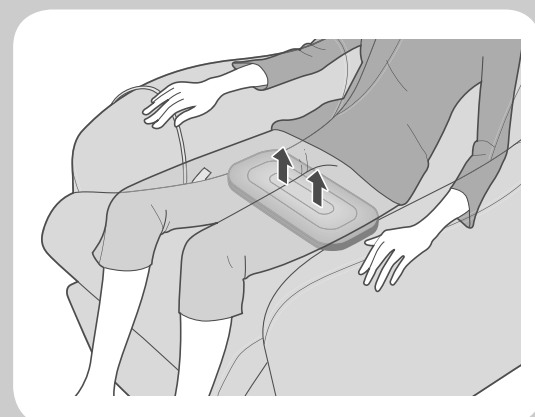

# マッサージを終了する

## タイマー機能について

マッサージが始まってから最大  
約15分で自動的に停止します。

## マッサージを途中で終了したいときは

**切/入** を押す

- もみ玉が収納位置まで動きます。

## 異常を感じたときは

**急停止** を押す

- すべての動作がその場で停止します。
- 転倒に十分注意しながら、本体から降りてください。

## ソファの状態に戻す


### 警告

- お子様には使わせない。また本体の  
上で遊ばせたり脚のせ台・座面・  
背もたれ・ひじ掛けの上にのらせ  
ない。
- 脚のせ台の上に立ったり座ったり  
しない。  
事故やけがのおそれがあります。




安全のため、使い終わったら必ず脚のせ台を収納  
してください。

## 1 フットマッサージ部を収納する

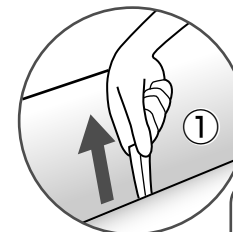

フットマッサージ ロック  
解除バンドを真上に引き  
上げる

- 収納部に何もな  
いことを確認して  
ください。

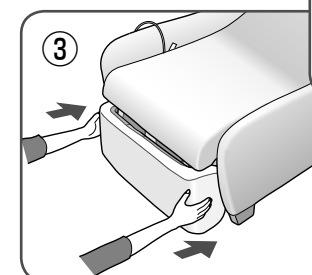

- 両手で座面の下に押し込  
んでください。
- 「カチッ」とロックがかか  
るまでしっかり押し込  
んでください。

脚のせ台の収納のしかたは(P.12参照)

## 2 ソファクッションを置く


### 電源を切る

### 警告

- ご使用の後は必ず電源スイッチを「切」、施錠ス  
イッチを「閉」にし、施錠キーを抜き電源プラグ  
を抜く。  
守らないとお子様のいたずらによる事故やけがの  
おそれがあります。

### 注意

- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、  
必ず電源プラグを持って抜く。  
守らないと感電やショートのおそれがあります。
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。  
ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因  
になります。
- 施錠キーは、子供の手の届かない場所に保管する。  
守らないと誤飲やいたずらによる事故やけがのお  
それがあります。

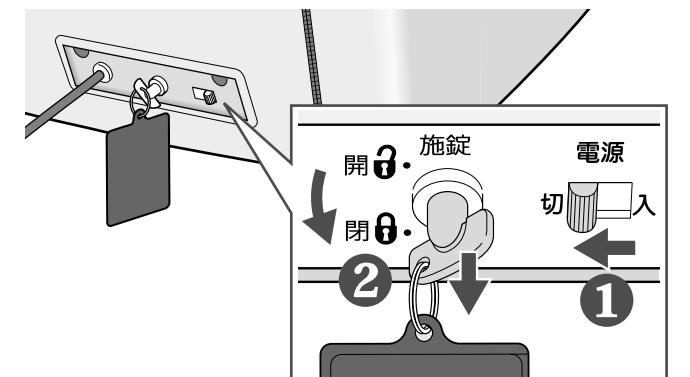


## 1 電源スイッチを「切」にする

## 2 施錠スイッチを「閉」にして 施錠キーを抜く

## 3 電源プラグを抜く

## 4 子供の手の届かない場所に 施錠キーを保管する

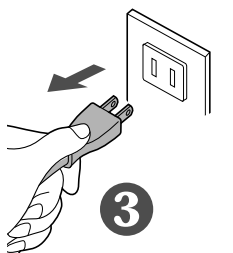

# お手入れのしかた

## ⚠ 注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
感電ややけどのおそれがあります。

- シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品は絶対使用しないでください。

### <EP-MS50の場合>

- 市販のレザーお手入れ用品(化学ぞうきん)をご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 変色の原因になりますのでビニール製品などを長時間接触させないでください。



## 布地・合成皮革・プラスチック部分

### ふだんのお手入れ

ほこりや軽い汚れは、柔らかい乾いた布でふく。

### 汚れがついたとき

- ① 水または中性洗剤をぬるま湯で3～5%位にうすめたものに、柔らかい布をひたし、よくしぼる。



- ② 表面をふく。  
(布地や合成皮革は、たたくようにふく)



- ③ 水を含ませた布をよくしぼってから、洗剤液をふきとる。



- ④ 柔らかい乾いた布でふく。

- ⑤ 自然乾燥させる。  
(ドライヤーなどで急激に乾燥させないでください)

### 汚れが落ちにくいとき

手順①のときに、以下のお手入れをお試しください。

#### <布地の場合>

水または中性洗剤でブラシ洗浄する。  
(こすりすぎて布地をいためないようにしてください)




#### <合成皮革の場合>

市販の「メラミンフォーム材質のスポンジ」に中性洗剤を含ませふき取る。


### EP-MS41の場合

カバーをはずして丸洗いができます。

#### ソファクッションカバー

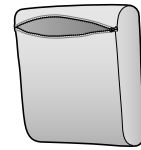

#### 本体カバー

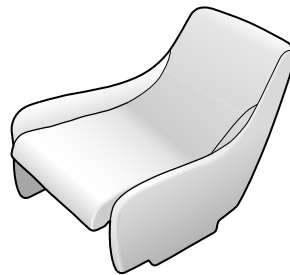

#### 前面カバー



### 洗いかた

#### 洗濯するときの注意




■手洗いする場合(洗濯機のご使用はおやめください)  
本体カバーやソファクッションカバーのファスナー、前面カバーの面ファスナーは閉じて洗ってください。

- ① 30℃以下の水に浸し、やさしく押し洗う

#### ご注意

- ・もみ洗いは絶対におやめください。
- ・漂白成分が入っている洗剤を使うと、色落ちしますので絶対におやめください。
- ・移染しやすいので他のものと分けて洗ってください。

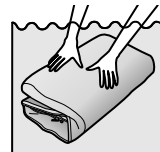

- ② 十分にすすぐ

- ③ 軽く押す程度に水を切る


#### ご注意

- ・絞って脱水すると、生地痛みや織り糸のほつれの原因になりますので絶対におやめください。

- ④ 軽くしわをのばし、陰干しする

#### ご注意

- ・天日干しすると、生地の縮みや色あせの原因になりますので絶対におやめください。
- ・他のものに移染しやすいので洗濯後、直ちに干してください。

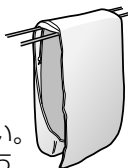

洗濯後、折りじわが気になるときはアイロンがけをしてください。

(アイロン使用上の注意)

本体カバー	前面カバー、ソファクッションカバー
スチームアイロンを浮かしながら整形してください。(生地に直接アイロンを当てないでください)	当て布をして、160℃を限界とした中程度の温度で行ってください。

### ■ドライクリーニングに出す場合


クリーニング店にて、ドライクリーニング(セキユ系)との依頼をしてください。また、タンブラー乾燥は絶対にしないようにお伝えください。

# カバー類の着脱のしかた (EP-MS41のみ)

## はずしかた


### ソファクッションカバー

背面のファスナーを開いて、中のクッションを取り出す

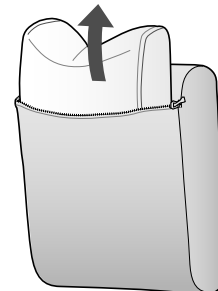

### 前面カバー

面ファスナーをはずす

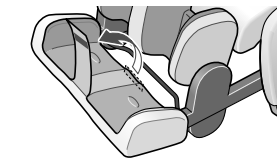


カバーを片側ずつはずす



### 本体カバー


- ① ファスナーを開く(2箇所)

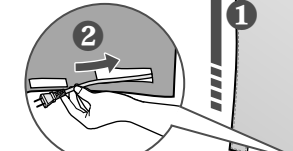


- ② 電源コードを穴から抜く

- ③ AとBの面ファスナーをはずして側面部をめくり上げる(反対側も)


- AとBの面ファスナーは外側からは見えない位置にあります。

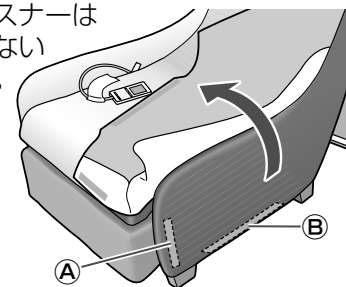

- ④ 背もたれ側部のファスナーを開く(2箇所)

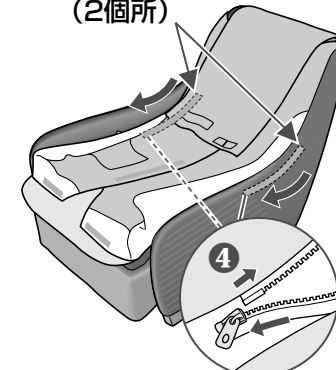

- ⑤ 座面の面ファスナー(3箇所)を1、2、3の順序ではずして、操作器をカバーの切り込みから抜く

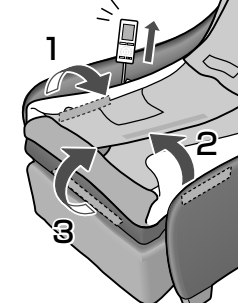


- ⑥ カバーを本体から取りはずす

## 取り付けかた

### ソファクッションカバー

- ① 前側に半分にたたみ、ファスナーの開口部から入れる

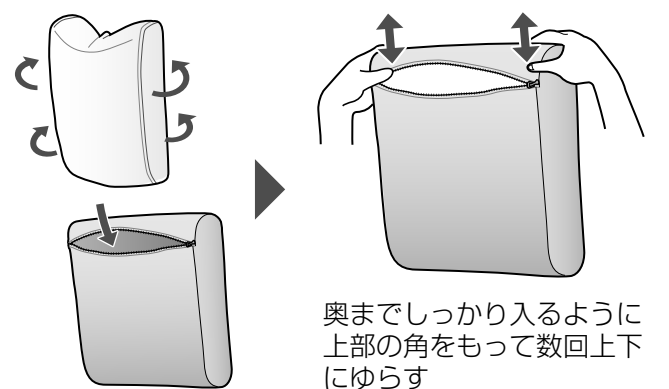

奥までしっかり入るように上部の角をもって数回上下にゆらす

- ② ファスナーを閉める


- ③ クッションが全体にいきわたるように前後を平手で数回たたく

### 前面カバー

- ① フットマッサージ部を引き出す


- ② 足裏部の側面にかぶせる

帯がついている方が上

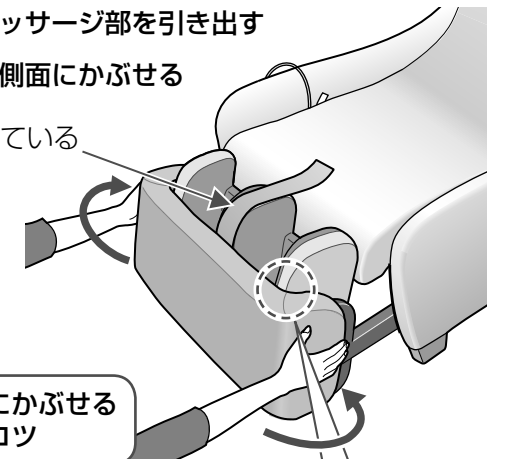


きれいにかぶせるためのコツ

- ① まず片側の上部の縫い目のラインを合わせながらカバーの端をつまんでかぶせていく
- ② 反対側も同様にかぶせる

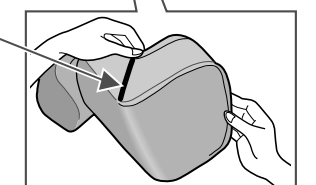

- ③ 帯を下ろし、帯の先端と足裏部の下部を面ファスナーでとめる

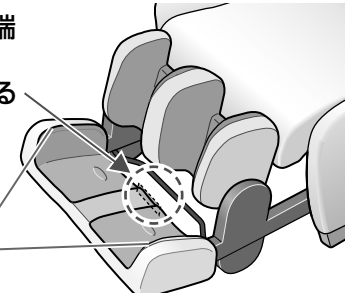

後部までカバーがしっかりかぶっていることを確認する

▶ 次のページにつづく


## カバー類の着脱のしかた (つづき)

### 取り付けかた(つづき)

#### 本体カバー

- 1 カバーを本体に置く
- 2 操作器とコードをカバーの切り込みに通す
- 3 背もたれ側部のファスナーを閉じる(2箇所)
- 4 座面側面の面ファスナーをとめる(2箇所)  
生地を引っ張りながら押し込む
- 5 操作器ポケットをひじ掛けの外側に出し(A)、ひじ掛けにカバーをかぶせる(B)
- 6 背もたれ上部にカバーをかぶせる  
背もたれ上部の角にカバーの縫い目のラインを合わせる
- 7 ファスナーを閉じる(2箇所)  
ひじ掛け側面のカバーを引っ張りながら交互に少しずつ閉じるときれいに閉まります。
- 8 電源コードを穴から通す

- 9 生地を引っ張りながら、A、B、Cの面ファスナー(5箇所)をとめる  
●BとCの面ファスナーは外側からは見えない位置にあります。

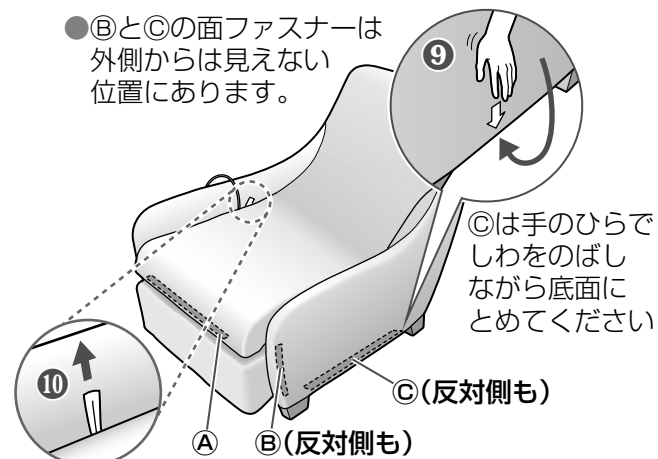

- 10 フットマッサージ ロック解除バンドをカバーの切り込みから出す

ソファクッションや本体カバーのしわ・たるみが目立つときは

#### 本体カバー

- 1 背もたれのしわ：  
外側に向かって軽くなめます。
- 2 座面のしわ：  
面ファスナーを一旦はずし、前方に生地を引っ張ったまま再度固定します。




#### ソファクッション

前後を平手で数回たたくと、クッションが全体にいきわたり、しわが軽減できます。

※使ううちに生地が多少伸縮し、しわが寄りやすくなります。折りじわが目立つときは、アイロンがけをしてください。(P.24参照)

### 別売品のご案内

他の色に変えたいときや、本体の汚れが心配なときにおすすめ

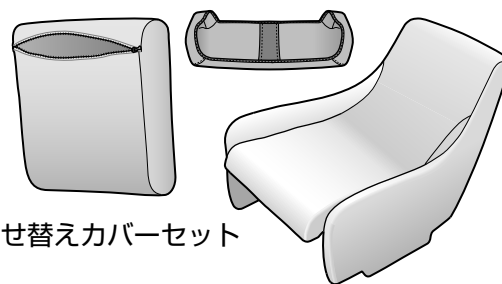

製品名：着せ替えカバーセット  
EP-2M41  
希望小売価格 17,500円(税込)  
2010年6月現在

## マッサージコースのおおまかな内容

### 「おまかせ」メニューのコース内容について


じっくりほぐし		首～肩甲骨の内側を短めにもみほぐします		背腰をソフト指圧ともみでほぐします		肩甲骨の内側や首肩をしっかりもみほぐします		背腰をもみやたたきでしっかりほぐします		首～肩甲骨の内側をゆったりともみほぐします		腰をゆったりともみほぐします		仕上げに全体をもみほぐします※1
ちよこつと8分		首～肩甲骨の内側を短めにもみほぐします		背腰をソフト指圧ともみでほぐします		首肩を重点にしっかりとほぐします		腰を重点にしっかりとほぐします		首～肩甲骨の内側をゆったりともみほぐします		腰をゆったりともみほぐします		仕上げに全体をもみほぐします※1
くつろぎタイム		全体をゆったりとしたもみでやさしくほぐします		少し速さを上げて、首肩をもみほぐします		少しだけ速いもみで腰をほぐします		徐々に速さを下げながら首肩をもみほぐします		ゆったりとしたもみで腰をほぐします		さらにゆったりとしたもみで落ち着かせます		仕上げに全体をやさしくほぐします※1
気分リセット		全体をたたきともみでリズムカルに刺激します		全体を速いもみでほぐします		徐々に速さを下げて、刺激を弱めていきます		ゆったりとしたもみで一旦落ち着かせます		全体をたたきともみでリズムカルに刺激します		さらに速さを上げて刺激感を高めていきます		仕上げに全体をたたきともみで刺激します※1

※1)「仕上げに全体をもみほぐす動作」の時間は、身長や強さの設定値によって変わります。

### コース中の動作内容について (イラストは動作のイメージ図です)


#### ソフト指圧

左右交互にソフトな指圧をする動作

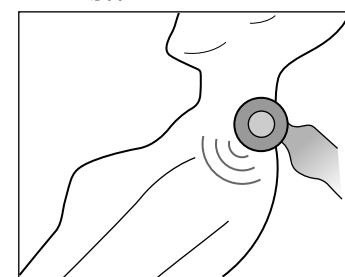


#### もみ

グイっともみこむ動作

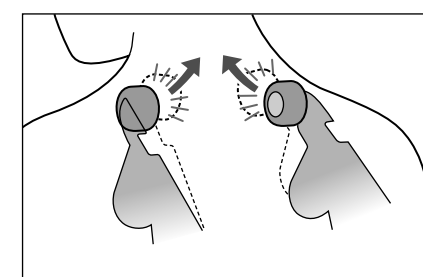

#### たたき

左右交互にトントンとたたく動作

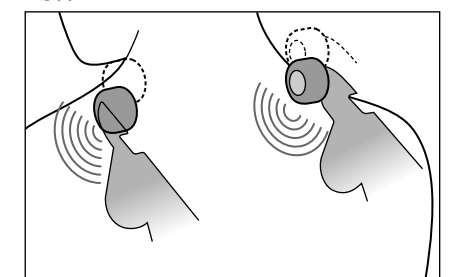



Q&A

定格・仕様

Q

病気で通院しているけど、使ってもだいじょうぶ？

A

通院先の医師と相談のうえ、使用してください。

マッサージは「触圧刺激」といって、筋肉に圧力をかけてほぐし、血行を促進する行為です。病気によっては、悪化を招く可能性もありますので、必ず医師に相談してください。(P.4～P.6参照)

Q

どれくらいの身長の人が使えますか？

A

体型に個人差があるため、あくまで目安として下記をご参照ください。

●身長が約155cmより小柄な方、約185cmを超える大柄な方は、上半身とフットマッサージを同時に使うと姿勢が窮屈になる場合があります。(窮屈に感じる場合の使いかたはP.14参照)

Q

左右の強さが異なるように感じるけれどだいじょうぶ？

A

構造上異なって感じる場合があります。

より自然な感覚でマッサージを行うために交互たたき機構を採用しているため、もみ玉の位置がずれて動作することがあります。そのため左右で強さが異なって感じるがありますが、故障ではありません。

Q

選んだコースによって、タイマーの時間は異なりますか？

A

異なります。

切入

を押してから、最初にコースを選んだときにタイマー時間がセットされます。

おまかせ

「ちょこっと8分」のみ約8分。その他は約15分。

わたし流

約3分、約6分、約9分、約12分、約15分の5段階に設定できます。

ポイント

約15分

エアー

エアーのみの場合、約15分。上半身と組み合わせた場合は、上半身のタイマーに従います。

途中でコースを変更する場合は、すでにタイマーがセットされているため、画面の「残り時間表示」内でしかマッサージできません。

Q

1か月の電気代はいくらですか？

A

1日30分(15分×2回)毎日使用した場合、約20円/月(税込み)です。

新電力料金目安単価22円/kWh(税込み)で計算

Q

動作音が気になるのですが…

A

マッサージ機能の動作音など、構造上発生する音があります。(詳しくは、P.30下部をご参照ください)

音が大きくなってきた場合、故障の可能性も考えられますので販売店に点検・修理をご依頼ください。

Q

引っ越しなどで、本体を運搬する際の注意点は？

A

次の点にご注意ください。

●本体の重心を中心に寄せて運搬しやすくするために、

切入

を2回押し、もみ玉を背もたれ中央部付近(もみ玉収納位置)まで移動してください。

●梱包箱がない場合は、傷や振動対策として梱包材で保護して、大切に扱ってください。

●梱包の際は、電源コードや操作器コードが本体に絡まっていないことを確認し、操作器とともに座面の上にまとめるなど、輸送時に地面に擦らないように配慮してください。

Q

本体を運搬するときに、間口を通らないのですが…

A

次の方法をお試しください。

搬入の前に、下図のように間口と前後のスペースの幅が十分あることを確認してください。また、搬入の際には本体が壁や柱に当たらないよう十分注意してください。

①

本体を横に倒した状態で本体の前側から間口を通す。

②

本体を回転させながら間口を通す。

＜上から見た図＞

販 売 名	マッサージソファ EP-MS50	
使 用 電 源	交流100V 50-60Hz	
消 費 電 力	60W (操作器で「切」のとき約0.3W)	
類 別	機械器具77バイブレーター	
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器(JMDNコード34662000)	
医療機器認証番号	223AKBZX00228000	
医 療 機 器 の 種 類	管理医療機器	
上半身マッサージ	施療範囲(上下方向)	約65cm(もみ玉移動距離約60cm)
	施療範囲(左右方向)	もみ動作時のもみ玉間隔 首・肩・背・腰部 約4cm～約15cm
	施療範囲(前後方向)	もみ玉の突出量(強弱調節)約6cm
	マ ッ サ ー ジ 速 さ	もみ 約14回/分～約25回/分 たたき(ソフト指圧含む) 約285回/分～約495回/分(片側) 移動速さ 約2～約4.5cm/秒
	上下移動距離	上下移動(全体) : 約65cmの範囲で上下方向に自動反復
エアーマッサージ	マ ッ サ ー ジ 幅	施療範囲(左右方向)と同じ
	エ ア ー 圧 力	3…約32kPa 2…約28kPa 1…約20kPa
タ イ マ ー	最大約15分で自動で切	
大 き さ	高さ約85cm×幅約76cm×奥行約108cm	
質 量	約48kg	
張 地	合成皮革	
ク ャ シ ョ ン 材	ウレタンフォーム／ポリエステル	
製 造 販 売 元	パナソニック株式会社 東京都港区西新橋2-38-5 西新橋MFビル	
製 造 元	上海松下電工有限公司 中華人民共和国上海市松江工業区江田東路258号	
製 造 国 名	中華人民共和国	

本製品は体重が約 100kg 以上の方が使用された場合、動作音が大きくなったり、布カバーの磨耗が早まるなどの場合があります。

寸 法 図

側面

正面

EP-MS41

EP-MS50

28

お手入れ／Q&A

お知らせ

29

# 故障かな？と思ったとき

下記の点検と処理をお願いします。  
処理後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。  
修理をご依頼される場合は、P.35をご覧ください。

症 状	原因と処置
もみ玉が途中で止まる (操作者の動作表示部やボタンがすべて点滅して消灯する)	<b>ご使用中、無理な力がかかった場合、安全のためにもみ玉の動きが止まることがあります</b> 表示部やボタンがすべて点滅してもみ玉の動きが停止した場合、本体の電源スイッチを一度切り、約10秒後に再度「入」にしてから操作してください。再度止まる場合は、体を浮かし気味にしてご使用ください。 (特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。)
もみ玉が肩や首の位置まで来ない	頭や背中が浮いていると、肩確認動作のときに、肩の位置を実際より下に検知してしまう場合があります。深く腰かけ、頭を背もたれにつけてマッサージを最初からやりなおしてください。 (P.17参照)
左右のもみ玉の高さ(強さ)が異なる	交互たたき機構を採用しているため、やむをえず発生するもので故障ではありません。 (P.28参照)
動作しない ●上半身(首～腰)のマッサージ ●ふくらはぎ・足裏のマッサージ	●電源プラグが抜けている。(P.13参照) ●本体の電源スイッチが「切」になっている。 ●操作者の「切入」を押したあと、メニューやコース選択、エアーマッサージのボタンを押していない。
フットマッサージ部が出ない	●フットマッサージ部の下部がじゅうたんや他のものに引っ掛かっているか確認してください。 ●座面前方の布地に引っ掛かっているか確認してください。
フットマッサージ部が収納できない	●フットマッサージロック解除バンドが操作器コードや布地に引っ掛かって戻らなくなっているか確認してください。
マッサージ停止後に再度「切入」を押しても電源が入らない	●終了処理中(約5秒間)のため「切入」を受けつけない場合があります。すべての動作が終了して、約5秒以上たってから「切入」を押してください。
破損してしまった	事故防止のため必ず販売店または「修理ご相談窓口」にご相談ください。 (P.35参照)
電源コード、プラグが異常に熱い	

## 動作中発生する音や感覚について

ご使用中に下記のような動作音や感覚がありますが、構造上発生するものですので異常ではありません。

●もみ玉が『押し』から『引き』に変わる際の音(カクン音・コツ音)	●ベルトの回転音(シュルシュル音)
●動作時にもみ玉が生地のシワを乗り越えるときの音・感覚(ポコン音・カクン音)	●モーター音(ウーン音・ウィーン音・ジー音)
●もみ・たたき動作などの動作音(カタカタ音・ピチピチ音・シャカシャカ音)	●座ったりもたれたときの張地のズレ音(ギュッ音)
●もみ玉動作時のキシミ音(キシキシ音)	●もみ玉と布のこすれ音(ギュッギュ音)
●上下動作時の動作音(カタカタ音)	●フットマッサージ部のガタつき
	●エアーの加圧動作音(ブー音)
	●エアーの排気音(シュー音・スー音)

## エラー表示について

エラー表示	内 容
F11 F12	内部の通信系統に異常がありますので、動作を終了します。
F13 F14 F32 F33	もみ機構部に異常がありますので、動作を終了します。

修理ご相談窓口にご連絡ください。  
ご連絡の際に、エラー表示の番号を伝えてくださると、  
点検・処置の対応がスムーズになります。

⚠ 警告

- 絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。  
発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

- 動かない場合や、異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。  
守らないと感電や発火のおそれがあります。



1. *How do you feel about the way you are being treated?*

販売店名 \_\_\_\_\_  
 電 話 ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_  
 お買い上げ日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

●製品名	マッサージソファ
●品番	EP-MS41・EP-MS50
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 当社は、このマッサージソファの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●修理に関するご相談は……

**パナソニック 修理ご相談窓口**

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**  
※携帯電話・PHSからも利用になります。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京都	☎(075)646-2123	京都市南区上烏羽中河原3番地
	帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3		大阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
					和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
東北地区	青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364	中国地区	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
首都圏地区	福島	☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	四国地区	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
中部地区	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	九州地区	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
中部地区	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地	沖縄地区	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
中部地区	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	沖縄地区	大島	☎(0997)53-5101	奄美市名瀬潮仁町11-2
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鷗4丁目42		沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421				

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理！ エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！



<http://club.panasonic.jp/>



<http://mobile.club.panasonic.jp/>



※ご愛用者登録には、  
CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。  
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。  
※このサービスは WEB 限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの  
「87」と「540#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

**06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

•上記電話番号がご利用いただけない場合は、  
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、  
回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のマッサージソファの点検を！



こんな  
症状はあり  
ませんか？

- コードや電源プラグが異常に熱い。
- 動作中に異常な音・振動がある。
- スイッチを入れても、時々運転しないことがある。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがある。



ご使用  
中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

使いかたによりますが、目安として1日30分のご使用で1～2年程度に1度点検していただきますと、より長く快適にご使用になれます。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めに従ってください。

パナソニック株式会社 ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Corporation 2010

P9310MS503

Y0410-2012

2012年1月1日作成(新様式第1版) Printed in China